

Flocare® Infinity™ sett

Engangs enteralt ernæringssett til bruk med Flocare® Infinity™ pumpe. Fri for DEHP og andre ftalater.

De ulike Flocare® Infinity™ sett er for tilkoping av sondeernæring til nasalsonder, PEG sonder eller til mellomstykker til gastrostomiknapper når tilførsel skjer via Flocare® Infinity™ pumpe. Den lille fargen skaper et klart skille fra administrasjonssett til parenteralt bruk.

Flocare® Infinity™ Pack sett er for tilkoping av alle Nutrison sondeløsninger i Pack (pose-) emballasje.


Flocare® Infinity™ universal sett er for tilkoping av både Nutricia og konkurrerende pose- og glassflaskeemballasjer.

Flocare® Infinity™ Pack sett for ambulant bruk er uten dråpekammer, og settet er 30 cm kortere inn til pumpen og 40 cm kortere ut fra pumpen.


I samsvar med flere offentlige anbefalinger er all Nutricias plastmateriale fri for ftalater. Nutricia har fjernet ftalatmykgjører DEHP og den har blitt erstattet med DINCH (di-(isononyl)-cyclohexane-1,2-dicarboxylate), en ny plastmykgjører som er helt fri for ftalater og andre skadelige komponenter.

Bestillingsinformasjon:

	Nutricias varenr.	Apotekbransjens varenr.	Salgsenhet til apotek/sykehus
Flocare® Infinity™ Pack sett	35158	898895	1 sett
Flocare® Infinity™ universal sett	35161	936639	1 sett
Flocare® Infinity™ Pack sett for ambulant bruk	35165	816519	1 sett
Flocare® Multi koblingsstykke	35743	901544	1 x 30 stk.

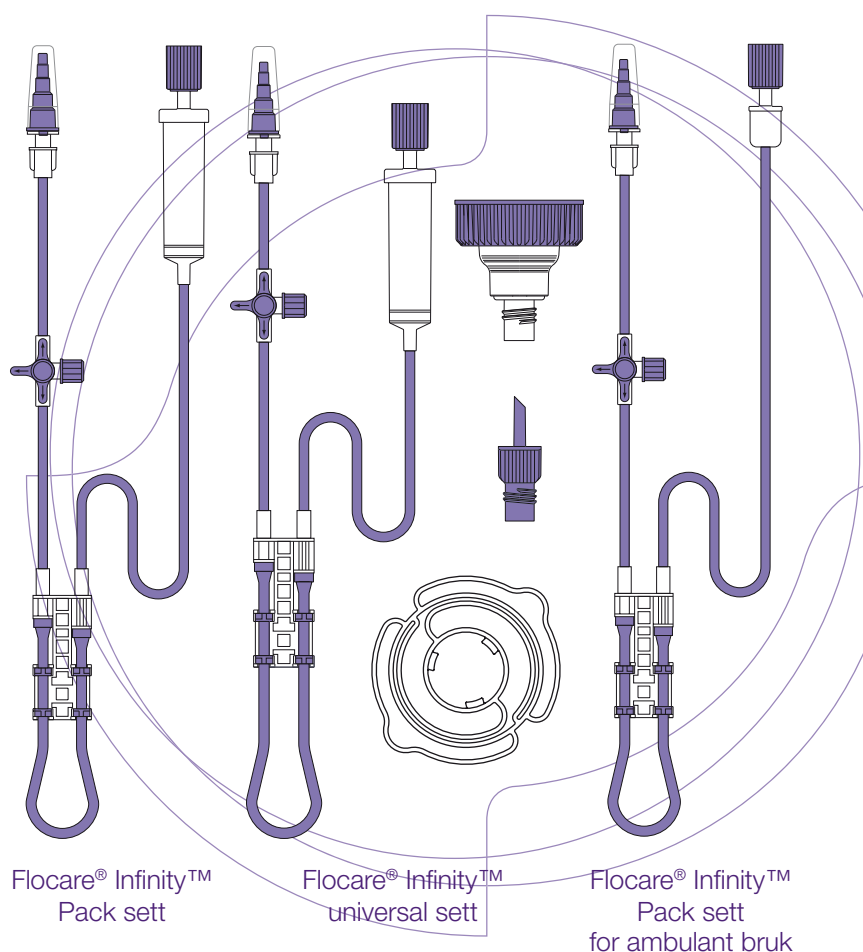

Flocare® Infinity™ sett

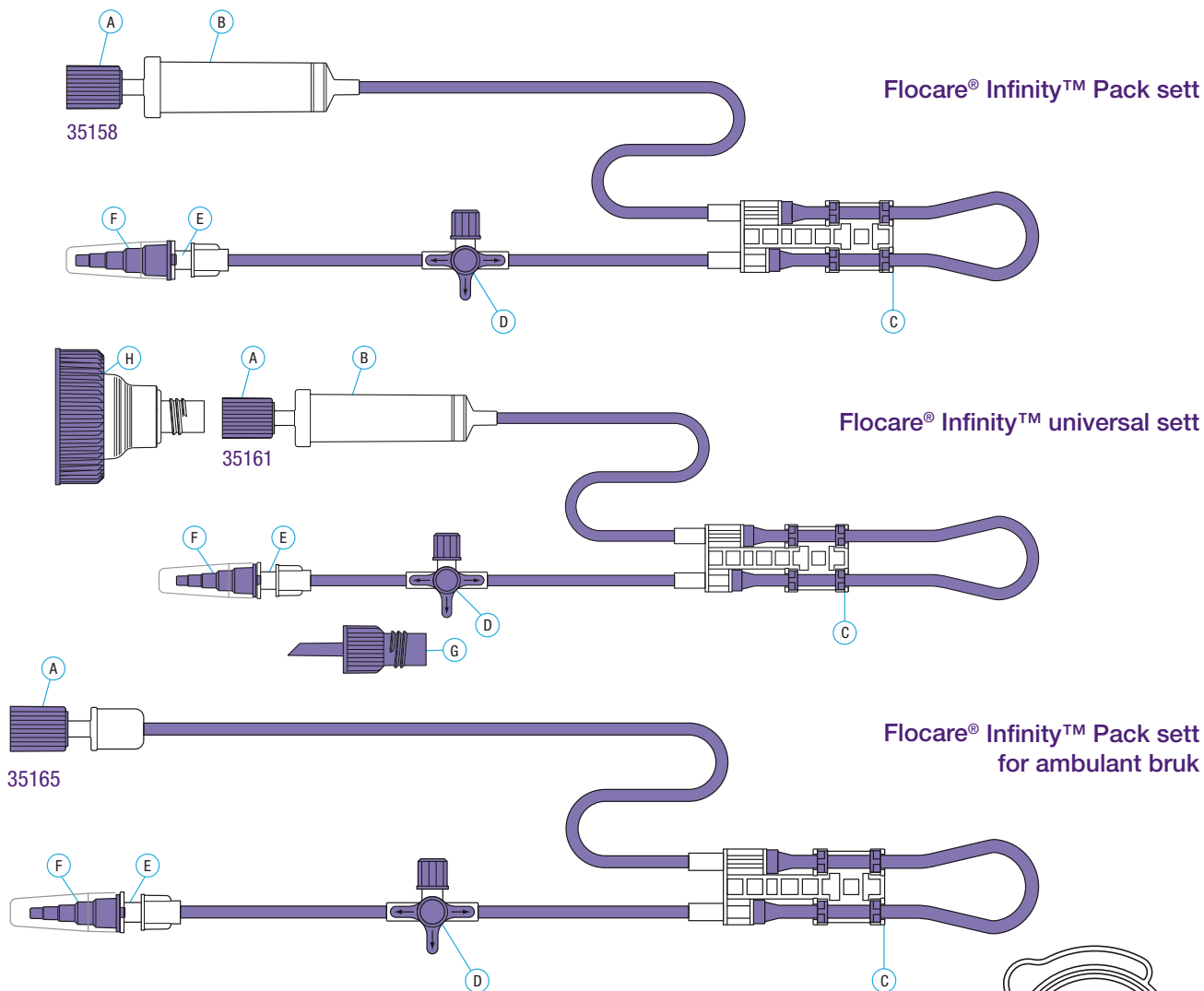

Flocare® Infinity™ sett består av:

- A : Pack konnektor med skru- og nedfeldt punkteringselement
- B : Dråpekammer (*Sett for ambulant bruk er uten dråpekammer)
- C : Flocare® Infinity™ pumpesegment
- D : 3-veiskran til medisinadministrasjon og gjennomskylling (med hette)
- E : Female luer-lokk konnektor
- F : 5 trinns konnektor (ikke IV kompatibel) med støvhette
- G : Multi koblingsstykke (følger med universal sett) (kan også bestilles separat til sett for ambulant bruk)
- H : Flaskekonnektor til glass- og tåteflasker (følger med universal sett)
- I : Flaskeoppheng (følger med universal sett)

Varianter: Pack sett til bruk med Nutricias sondeløsninger i Pack (pose-) emballasje.
Universal sett til bruk med Nutricia og konkurrerende pose- og glassflaskeemballasjer.
Pack sett for ambulant bruk.

Materiale: Medisinsk kvalitet PVC, fri for ftalater.

Emballasje: Enkeltvis sterilt pakket.

Holdbarhet: 36 måneder fra produksjonsdato. Holdbarhetsdato på pakningen.

Oppbevaring: Lagres ved romtemperatur.

Brukstid: 24 timer.